

UVT-S-AR, DNA/RNA UV-pulitore armadio

DESCRIZIONE

Armadio UV DNA/RNA **UVT-S-AR** progettata per operazioni di pulizia con campioni di DNA. L'armadio UV fornisce protezione contro le contaminazioni.

È un modello da banco composto da struttura in metallo e una superficie di lavoro in acciaio inossidabile.

Le armadio UV sono dotate di una lampada UV aperta installata nella parete superiore. La radiazione UV delle lampade aperte disinfetta l'area di lavoro rendendo inattivi i frammenti di DNA/RNA in 15-30 minuti di esposizione. Un timer digitale controlla la durata della radiazione UV diretta. Una lampada a luce diurna fornisce una corretta illuminazione della superficie di lavoro.

Le armadio UV sono dotate di un circolatore AR UV a flusso con funzione battericida, che fornisce una decontaminazione costante all'interno dell'armadio durante il funzionamento. Se ne consiglia l'utilizzo per le operazioni con ampliconi di DNA/RNA.

Il circolatore UV AR si compone di una lampada UV, un ventilatore e filtri antipolvere organizzati all'interno di uno speciale corpo in grado di proteggere l'utente contro i raggi UV durante il funzionamento della armadio UV. Il circolatore aumenta la densità massima di luce UV rendendola sufficientemente efficace per l'inattivazione DNA/RNA. Il circolatore UV processa 100 volumi per ora, creando condizioni asettiche permanenti di lavoro all'interno della armadio.

Su richiesta, sono disponibili i tavoli mobili **T-4L** con freni alle ruote e cassetto, appositamente progettati.

Vantaggi delle armadio UV Biosan:

- Decontaminazione UV ad alta densità ozone-free
- Lampade UV a lunga durata (9.000 ore in media)
- Spegnimento automatico delle lampade UV quando lo schermo protettivo è aperto
- Circolatore a flusso con funzione battericida per una decontaminazione permanente all'interno dell'armadio durante il funzionamento
- Pareti in vetro antiurto
- Ridotta rumorosità, ridotto consumo energetico
- Tavoli per l'installazione di armadio UV
- Le armadio UV con circolatore UV AR battericida sono dispositivi tutelati da brevetto di Biosan




NUMERO DI CATEGORIA

BS-040107-AAA	100-240VAC 50/60Hz presa Euro, spina Euro
BS-040107-AAB	100-240VAC 50/60Hz presa UK, spina UK
BS-040107-AA7	100-240VAC 50/60Hz presa US, spina US
BS-040107-A04	100-240VAC 50/60Hz presa AU, spina AU
BS-040107-AK	IQ OQ documento
BS-040107-CK	PQ documento

SPECIFICHE

Materiale pareti	Retro: acciaio inossidabile. Lati e fronte: vetro (EUROGLASS, Germania)
Materiale superficie di lavoro	Acciaio inossidabile
Lampada UV aperta	2 x 30W battericida integrato UV-C, TUV 30W 1SL/25
Livello di radiazione UV	18 mW / cm ² / sec
Tipo di radiazioni	UV ($\lambda = 253,7$ nm), ozone-free
Impostazione digitale del tempo di esposizione diretta ai raggi UV	1 min–24 h / non–stop (incremento di 1 min)
Circolatore UV	1 x 30W (efficienza >99% per 1 ora)
Lampada a luce diurna (per illuminare l'area di lavoro)	1 x TLD-30W
Spessore dei pannelli laterali	4 mm
Spessore del pannello frontale superiore	8 mm
Spessore dello schermo	5 mm
Trasmissione ottica	95%
Protezione UV	>96%, pellicola di protezione UV
Area di lavoro	1210 × 500 mm
Dimensioni di apertura	1210 × 190 mm
Funzioni di sicurezza	Spegnimento automatico della lampada UV quando lo schermo è aperto
Prese di corrente all'interno dell'unità	3 presas integradas, max. 1000 W e ingresso per cavi di alimentazione
Dimensioni complessive (L×P×H)	1250 × 600 × 590 mm
Peso (netto/lordo)	58 / 68.5 kg
Consumo energetico	135 W
Tensione nominale di funzionamento	100-240 V, 50/60Hz
Tavolo opzionale	T-4L (1290 × 600 × 770 mm)
Unità con cassetti opzionale	LF-1 (300 × 450 × 705 mm)

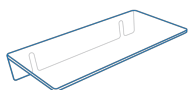

F-1
BS-040104-DK
ripiano

F-1, ripiano



P-5
BS-040104-CK
ripiano per pipette

P-5, ripiano per pipette



T-4L
BS-040107-BK
Tavolo

Il nuovo design modulare dei mobili da laboratorio assicura flessibilità e facilità di utilizzo.



LF-1
BS-050101-BK
Unità a cassetti

Il nuovo design modulare dei mobili da laboratorio assicura flessibilità e facilità di utilizzo.



PDS-250
BS-040107-DK
soluzione di decontaminazione da DNA/RNA

Soluzione di decontaminazione da DNA/RNA.



PDS-10L
BS-040107-FK
soluzione di decontaminazione da DNA/RNA

Soluzione di decontaminazione da DNA/RNA.